

胃・ドレナージバッグ

排液とともにバッグ内に流入し貯留した空気を抜き取る
「エア抜きチューブ栓」付きバッグです。

胃・ドレナージ液のほか、多用途のドレナージバッグです。

disposable
製品

EOG
滅菌済


逆流防止弁付・バッグ内エア抜き機能チューブ付

1,000mLバッグ 目盛50mL刻み

特長

- バック内貯留のエア抜きチューブ
エア抜き→(開栓)、通常使用時→(閉栓)
シリンジ接続が可能です。
- 採液に必要な用具一式が滅菌包装され、
必要なときいつでも安全に使えます。
- 容量目盛付でバッグ内の観察ができます。
- 逆流防止弁で内容液の逆流は防止されます。
- 排液の時間短縮として、内径10.5mmの
太径排液チューブを採用。
粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。
液ダレ・汚損防止のキャップ付です。
- ロックリング付接続管のほか、
太径用接続管が付属されていますので、
どの状況でも接続可能です。
バッグ上部には補強板が入っていますので、
吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。

部品説明

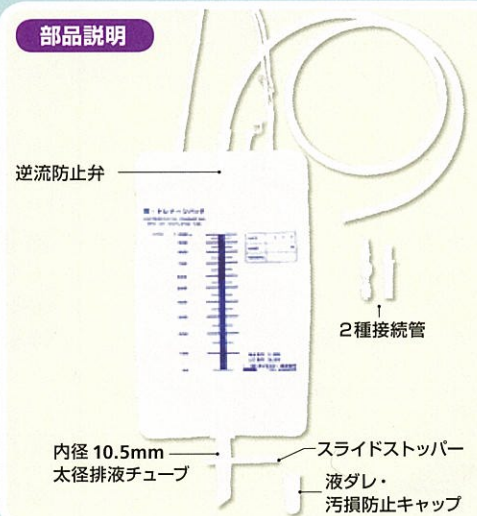

材質：医療用塩ビ/ABS/EVA
サイズ：横166×縦280mm
上部チューブ：内径6×外径8×長さ900mm
排液チューブ：内径10.8×外径13.3×長さ70mm

規格・包装	製品No. JANコード
1,000mLバッグ10セット	N20000 4517850000228

ISK アイエスケー株式会社

本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-12 TEL 03-3812-0191 FAX 03-3812-9284
 医療機器認可工場 / 〒120-0003 東京都足立区東和3-5-4 TEL 03-3620-1003
 <URL> 会社案内 <http://www.isk-tokyo.co.jp/>
 製品カタログ <http://www.isk-catalog.com/> <e-mail> yes@isk-tokyo.co.jp

